

Varios 970 Complete Sets



Optic

Varios 970 Optic Complete Set

제품명 VA970 LUX (230V) 코드번호 Y1001168

SET 내용

- 유닛 • 핸드피스 • 핸드피스 코드 • 스케일링용팁3개 (G4, G6, G8) • 풋페달 (FC-70)
- 2 x 세척 주수용 병 • 3 x 토크 리미터 팁 렌치 • AC 전원선 • 멸균 카세트

Non-Optic

Varios 970 Non-Optic Complete Set

제품명 VA970 (230V) 코드번호 Y1001175

사양

- 전원 : AC 230V 50/60 Hz
- 발진주파수 : 28-32 KHz
- 최대출력 : 11 W (G모드시)
- 크기 : W160 x D270 x H190 (mm) (Including Bottle)
- 유닛 중량 : 2.1 kg (Except attachment)
- 주수약병용량 : 400 mL (x 2 bottles)

Varios 170 Complete Sets



Optic

Varios 170 Optic Complete Set

제품명 VA170LUXS5 코드번호 Y1002114

SET 내용

- 내장형 • 핸드피스 • 핸드피스 코드 • 스케일링용팁3개 (G4, G6, G8) • 3 x 토크 리미터 팁 렌치 • 멸균 카세트

Non-Optic

Varios 170 Non-Optic Complete Set

제품명 VA170S5 코드번호 Y1002115

사양

- 전원 : AC 24V ±10% (or DC24-36V)
- 발진주파수 : 28-32 KHz
- 최대출력 : 11 W
- 크기 : W63 x D54 x H26 (mm)
- 유닛 중량 : 69 g


TIP VARIATION

다양한호환성 NSK Satelec EMS

NSK Varios Tip은 NSK 스케일러 뿐만아니라전 모델 Satelec® 초음파스케일러와호환되며 EMS® 초음파스케일러에서는 Scaling, Perio(Rootplaning) Maintenance (V-Tip) 등의 모드에서사용할수있습니다. (별도모델)

다양한치료용도

NSK는 다양한 치료용도에 적합하고 다양한 Varios 초음파 스케일러를 제공합니다.

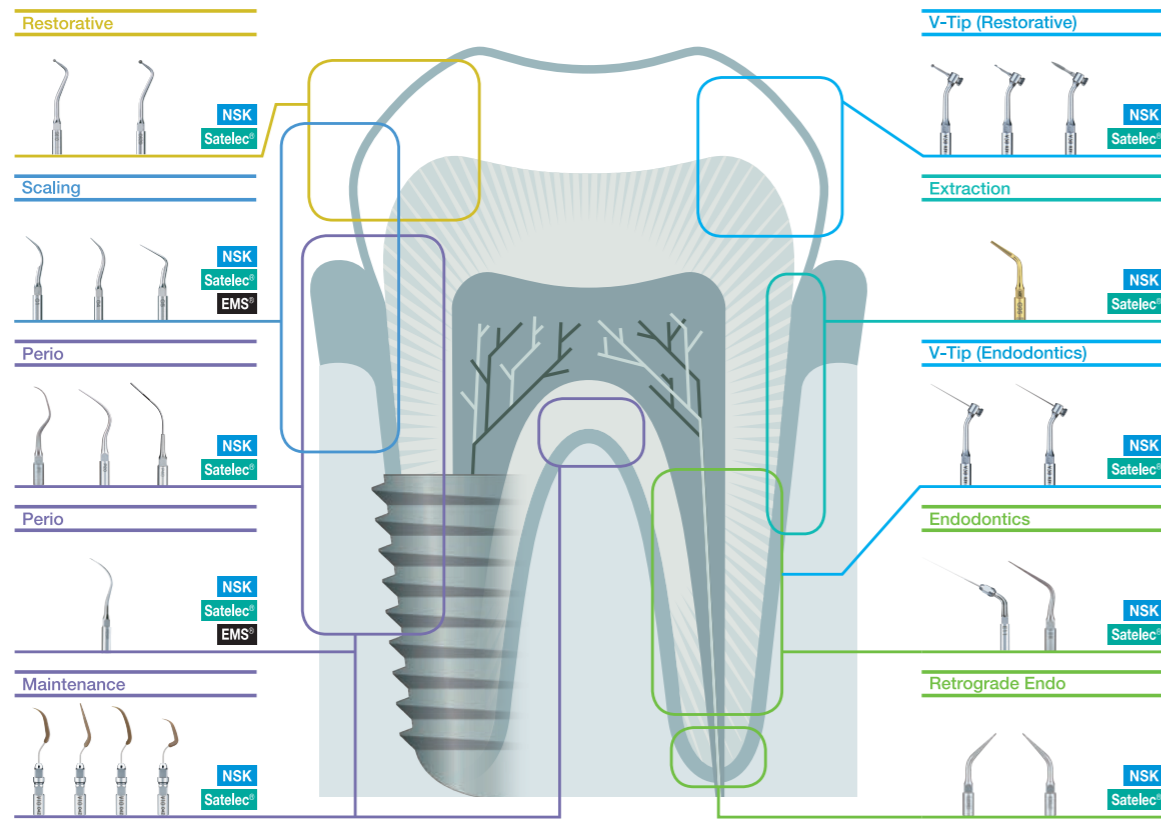

NSK

CREATE IT.

Varios

iPiezo engine®



NAKANISHI INC.

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

사양이나 형상은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NSK Dental Korea Co.,Ltd

www.nsk-korea.co.kr

서울특별시 영등포구 선유동2로 70, 이화빌딩 5층
TEL: +82 2 2633 8990 FAX: +82 2 2633 8990

REF PR-D1060KO Ver.1 16.04.00

Varios series

Multi Function Ultrasonic Scalers


뛰어난 성능 및 기능성

새로운 Varios 시리즈는 piezo 기술의 최신 개발 기능이 적용되어 있습니다. NSK iPiezo 엔진은 팁 로딩에 따라 최적의 주파수를 자동으로 조정하여 안정된 출력을 보장 합니다. 새로운 세련된 Varios 시리즈 핸드피스는 구강 접근성을 상당히 개선하여 사용자가 보다 효율적으로 진료 할 수 있습니다. New optic Varios 핸드피스는 치과에서 현재 사용 할 수 있는 핸드피스 중 가장 작고 가벼운 핸드피스 입니다. 트윈 LED 조명은 그림자가 없는 우수한 가시성 으로, 진료자가 편안하게 시술을 할 수 있어서 각종 초음파 스케일링 시술로 인한 진료자의 부담을 줄일 수 있습니다.



LED 조명과 균형을 맞춘 가장 얇고 가벼운 핸드피스

매우 슬림한 Varios2 핸드피스는 뛰어난 접근성으로 가시성이 높아져 더 편안하게 사용할 수 있습니다. 또한 핸드피스는 반복적으로 135°C의 멸균기 및 건열 소독기에 처리 가능 합니다.

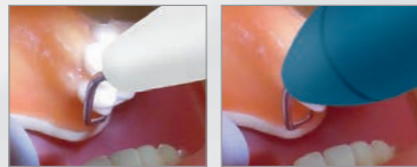

Varios2 핸드피스

경쟁사



NSK LED는 사용자의 진료 영역에 상당히 편리한 점을 가져다 주는 자연 채광과 유사한 수준의 밝기를 제공합니다

선명성 : LED는 할로겐 조명에 비해 선명한 시야를 보장하며 자연광과 유사한 수준의 밝기를 생성 합니다.

내구성 : LED 광원은 할로겐 전구보다 수명이 더 길어서 내구성이 탁월 합니다.

iPiezo engine®



피드백 기능

NSK iPiezo 엔진은 치아 표면의 상태별 팁마다 거기에 맞는 적절한 파워를 공급합니다. iPiezo 엔진은 단단한 치석을 제거할 때에도, 파워가 떨어지는 일이 없도록 안정된 주파수 출력을 제공합니다.

자동 튜닝 기능

자동 튜닝 기능은 선택된 출력 범위에서 팁으로 지속적으로 안정된 주파수를 제공하며 또한 초음파 스케일러를 사용하는 시술자가 안정된 출력을 느낄 수 있도록 하여 최적의 시술 결과를 보장 합니다.

Varios 970

iPiezo engine®

Optic / Non-Optic **LED**

다양한 시술이 가능한 다기능 이동용 스케일러

All in One 치주, 근관 치료, 스케일링, MI 적용 및 임플란트 유지 시술이 작고 세련된 하나의 유니트로 모두 가능 합니다. 독립적인 펌프와 동일한 용액 혹은 각기 다른 용액을 담을 수 있는, 400 mL의 편리한 대용량 용기로 구성 되어 있습니다. 새로운 Varios의 기능은 최근에 개발된 피에조 기술 : NSK의 iPiezo 엔진은 팁의 로딩에 따라 최적의 주파수를 자동으로 조정하여 안정된 파워를 보장합니다.

특성

- 쉽게 교환 가능한 용액 용기
- 현장에서 손 쉽게 유지 보수 관리를 할 수 있도록 디자인
- 터치 제어 모드 표시: 엔도, Perio, 일반 모드
- 파워 및 물 분사량 설정을 10 단계별로 표시 가능함
- 병 또는 외부 직수 공급 이중 Water 조절 컨트롤
- 사용자 설정을 저장하는 간편한 메모리 기능
- 병 혹은 직수 공급 및 주수가 필요없는 진료 등 주수 상태를 선택 할 수 있습니다.



대형 LED 디스플레이

모든 운영 모드는 쉽게 인식되는 버튼에 의해 제어되고 대형 LED 디스플레이에 표시됩니다.



자동 청소 모드

필요한 경우 자동 청소 모드 버튼을 누르면 튜브와 핸드피스 및 팁을 세정합니다. 이 채널은 시술 후 독립적으로 세정할 수 있습니다.



360° 풋 페달

새로운 Varios 풋 컨트롤은 모든 각도에서 쉽게 조작 할 수 있습니다.



멸균 카세트

핸드피스보호 팁 랜치는 사용자의 편의를 위해 함께 살균 할 수 있습니다.

Varios 170

iPiezo engine®

Optic / Non-Optic **LED**

통합 다기능 초음파 스케일러

신품과 기존 장비 모두 쉽게 통합 장착 되는 작은 모듈

Varios는 진료자가 사용하는 시간동안 안정적으로 공급하는 새로운 NSK iPiezo 엔진을 갖추고 있습니다. 트윈 LED와 슬림화 새로운 초경량 핸드피스는 간단하게 기존의 핸드피스 튜브에 장착하고 기존 페달 컨트롤을 통해 사용 가능합니다.

